

medisun[®] 2800 Innovation 2M

Fototerapia professionale made in Germany



DATI TECNICI

	Descrizione	Art-No.
medisun 2800 Innovation 2AB-3	UVA + UVB-311, 40 x 2 m lamps, 400 V, 3 x 16 A, 3PH + N + PE, 50 Hz	2201
medisun 2800 Innovation 2AB-1	UVA+UVB-311, 40x2m lamps, 230 V, 1x32A, 1PH+N+PE, 50-60Hz	2202
medisun 2800 Innovation 2B-3	UVB-311, 40 x 2 m lamps, 400 V, 3 x 16 A, 3 PH+N+PE, 50 Hz	2203
medisun 2800 Innovation 2B-1	UVB-311, 40 x 2 m lamps, 230 V, 1 x 32 A, 1 PH + N + PE, 50-60 Hz	2204
medisun 2800 Innovation 2A-3	UVA, 40 x 2 m lamps, 400 V, 3 x 16 A, 3 PH + N + PE, 50 Hz	2205
medisun 2800 Innovation 2A-1	UVA, 40x 2m lamps, 230 V, 1 x 32 A, 1 PH + N + PE, 50-60 Hz	2206
medisun 2800 Innovation 2A1-3	UVA-1, 40 x 2 m lamps, 400 V, 3 x 16 A, 3 PH + N + PE, 50 Hz	2208
medisun 2800 Innovation 2A1-1	UVA-1, 40 x 2 m lamps, 230 V, 1 x 32 A, 1 PH + N + PE, 50-60 Hz	2212
TENSIONE DI COLLEGAMENTO	5.500 W	
DIMENSIONI ESTERNE (PORTE CHIUSE)	122 cm x 127 cm x 230 cm	
DIMENSIONS ESTERNE (PORTE APERTE)	122 cm x 150 cm x 230 cm	
SPAZIO ENTRATA	78 cm	
SPAZIO INTERNO	94 cm	
PESO	390 kg	
CERTIFICAZIONE CE	CE 0197	

Technical changes reserved.

medisun[®] 2800 Innovation 2M

SISTEMA DI TERAPIA UV CORPO INTEGRALE




medisun[®] 2800 Innovation 2M

Le cabine total body della gamma MEDISUN 2800 INNOVATION sono state progettate con una struttura portante compatta, solida e stabile. L'acciaio verniciato che compone la struttura ne garantisce la robustezza e la lunga durata nel tempo. Il sistema di terapia Medisun 2800 Innovation 2M si distingue per il dispositivo di dosaggio a misurazione permanentemente e per le lampade UV particolarmente lunghe (200 cm). La robusta base d'acciaio, è dotata di supporti regolabili per una facile e precisa installazione e messa in piano della macchina.



CARATTERISTICHE:

- 40 lampade da 200 cm e 120 Watt
- Trattamento UVB-311 e/o UVA o UVA-1
- Costruzione in lamiera d'acciaio verniciata
- Irradiazioni omogenea grazie alla nuova forma rotonda e non più rettangolare
- Spazio interno: 94 cm di diametro
- Porte a doppio battente
- Monitor TFT con Touchscreen 10,4"
- 4 sensori UV real time per l' esatta dosimetria
- Pannello di controllo interno con display tempo
- Software smart dosing per un'irradiazione omogenea dalla testa ai piedi
- Illuminazione interna
- Copertura in vetro acrilico delle lampade
- Maniglie di sostegno per la stabilità
- Raffreddamento apparecchio intelligente
- Sistema di raffreddamento per il paziente
- Riflettori interni luminosi per l' incremento della potenza
- Spegnimento delle lampade in caso apertura porta
- Sistema di filtraggio chiuso
- Pacchetto software MEDISOFT per il controllo da PC (opzionale)

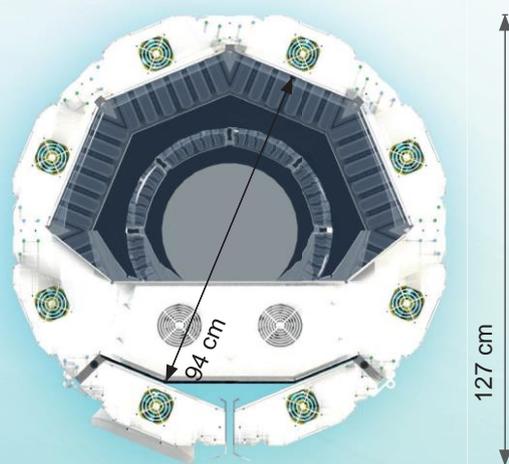

122 cm




Colori individuali


I dispositivi medisun 2800 Innovation 2M sono disponibili in oltre 100 diversi colori.

INDICAZIONI


- Psoriasi
- Vitiligine
- Dermatite atopica
- Micosi Fungoide (MF)
- Fotodermatosi polimorfa
- Prurito uremico

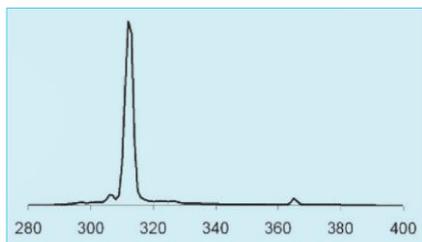

UVB-311

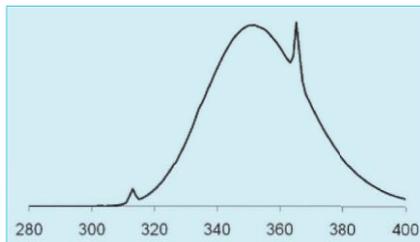

UVA

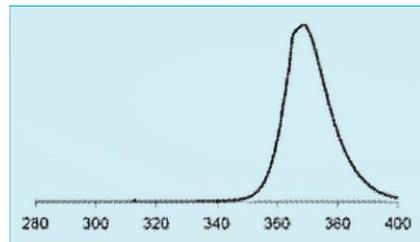

UVA-1

